

物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴機器

OG Wellness
Wellness and Beyond

オージー技研株式会社

オージーウエルネス

検索

【平日受付コールセンター】

0120-01-7181

受付時間 / 9:00～17:00

【休日受付コールセンター】 ○休日専用/土・日・祝・年末年始

0120-33-7181

受付時間 / 9:00～17:00

北日本支店（宮城・山形・福島）
札幌営業所（北海道）
盛岡営業所（岩手・青森・秋田）
北関東支店（埼玉・群馬・栃木・茨城）
新潟営業所（新潟）
南関東支店（東京・山梨）
横浜営業所（神奈川）

千葉営業所（千葉）
中部支店（愛知・岐阜・三重・静岡・長野）
金沢営業所（石川・富山・福井）
関西支店（大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山）
神戸営業所（兵庫）
中四国支店（岡山・鳥取）
広島営業所（広島・島根・山口）

高松営業所（香川・愛媛・徳島・高知）
九州支店（福岡・大分・熊本・長崎・佐賀）
鹿児島営業所（鹿児島・宮崎）
那覇出張所（沖縄）

○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。 また、本カタログの記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に“非課税”と記述しています。
○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。 ○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本カタログの記載内容は2023年12月現在のものです。

S48_2312_845

OG Wellness
Wellness and Beyond

Sereno Chair in

HK-3800

Sereno Chair in

セレーノチェアイン

介助者の負担を軽減し、
安心・快適な入浴を実現したチェアインバス

1 介助者の負担軽減

簡単操作



シンプルなパネルデザインにより、簡単に操作することができます。入浴時間もワンタッチで設定ができ、入浴者一人ひとりに合わせた入浴設定をラクにおこなうことができます。

ミストシャワーでしっかり洗身



おまかせコースではミストシャワーとボディソープを同時に吐出し、汚れをしっかりと落とします。

臀部洗浄シャワー



洗にくい部位にも届くようにシャワーを配置しており、洗身の介助をサポートします。

おまかせコース (3分／5分)

ボタンひとつで、自動洗身をおこなうことができ、介助の負担を大幅に軽減することができます。

	予洗い (シャワー)		洗身 (シャワー＋ボディソープ)		洗い流し (シャワー)
3分	30秒	▶	30秒	▶	2分
5分	30秒	▶	30秒	▶	4分

シャワーのみを吐出する、「シャワーコース (1～10分)」も搭載しています。




シャワー浴でも高い保温効果を実現

高い気密性による保温効果



入浴時は浴槽カバーとネックカーテンで浴槽を覆うため、浴槽内の熱を逃がしません。隙間が少なく、気密性が高い設計により、シャワー浴でも十分な保温効果を期待できます。

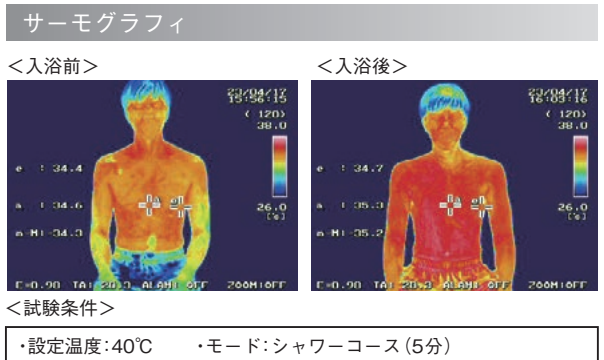

衛生面に配慮した機能とオープン型の浴槽により日常清掃の負担を軽減

ラクラク清掃で清潔



清掃がおこないやすい上面オープン型。洗いにくかったドーム型シャワーバスの問題点を解決、清潔に保つための洗いやすさも快適にしました。


浴槽と床の空間が広い為、清掃がおこないやすくなっています。

殺菌ボタン

スイッチひとつで薬液殺菌が可能。スイッチを押すだけで薬液を混入したシャワーを吐出し、洗い流しも自動でおこないます。



2 入浴時の湯量を大幅に削減

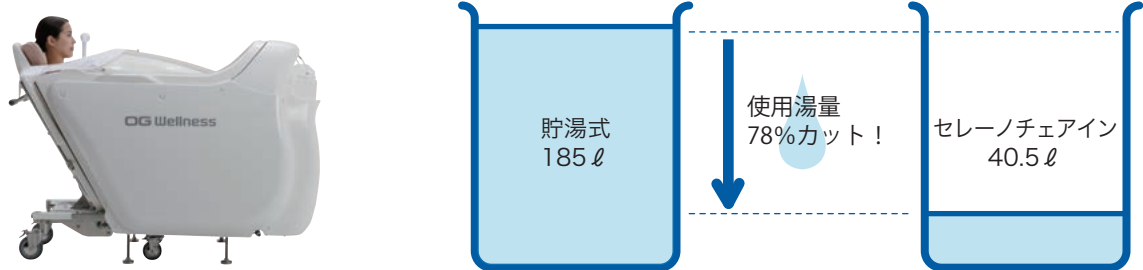

※トウティ (HK-8100) と比較
※実使用湯量は入浴時間とご利用者の体格により変動します。

おまかせコース(3分)で入浴した場合の使用湯量は、貯湯タイプの座位浴槽と比較して使用湯量の削減を図ることができます。入浴介助だけでなく、ランニングコストでも負担を軽減。

3 安心・安全をサポートする 細部に工夫がある搬送車



人間工学の視点から軽い力で
傾斜できるバランスチルト

独自のバランスチルトにより軽い力で
傾けられます。入浴者の体重に左右
されず、女性の介助者ひとりでもラクに
操作が行えます。



サポート性の高い安全ベルト

安全ベルトは、腰部と胸部を標準装備
しています。オプションで足部も追加でき、
より安全性を高めることができます。



移乗がラクな
開閉式サイドフェンス

車椅子と搬送車をより近くまで寄せられ、
移乗がラクになる「開閉式サイド
フェンス」を採用。さらに膝上までガード
できる大型のサイドフェンスで安全性
を高めました。

立ち上がり・移乗をサポートする収納式レッグレスト



レッグレストは、シートの下へ完全に収納することができます。足元に
空間が生まれ、動作を安全にサポートできます。入浴者は、踵を引いて
立ち上がる自立動作がしやすくなります。

きちんと清掃・ラクラク清掃




スポンジマットやヘッドレストは簡単に取りはずしできます。
気になる裏面も洗やすいので、隔々まで清潔を保つこと
ができます。



シートが取りはずせるので、特に汚れが気になるおしり
部分の清掃もきちんとおこなえます。

2種類の浴槽に対応可能

搬送車(RA-8100)は、セレーノチェアインとトゥッティにご使用いただけます。

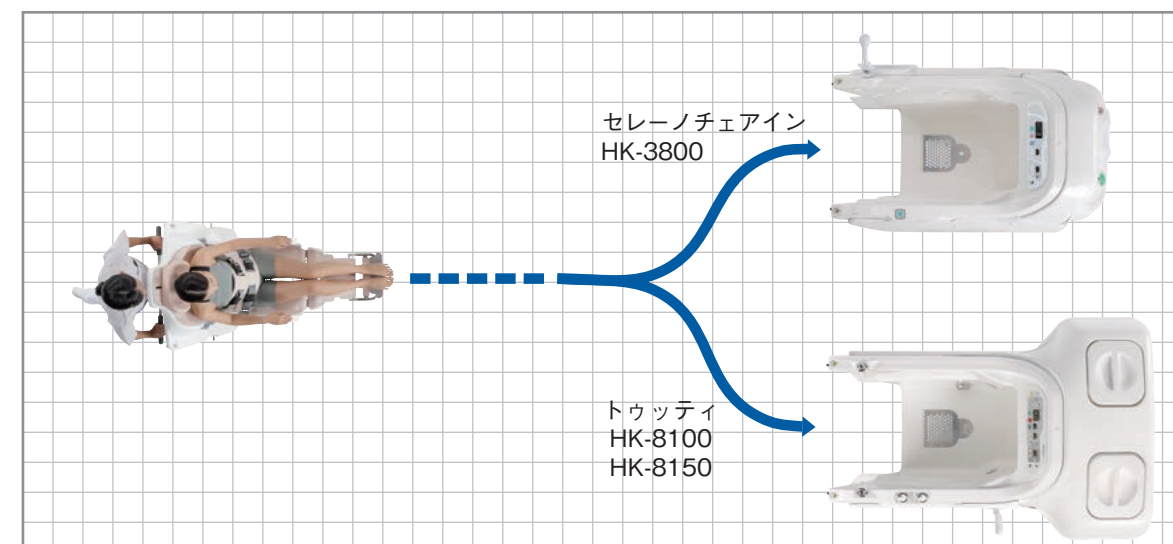

仕 様

セレーノチェアイン

HK-3800-S ¥6,000,000 (税別)

販 売 名	セレーノチェアイン
電 源	単相100V 50/60Hz
電 源 入 力	420VA
消 費 電 力	350W (50/60Hz)
外 形 寸 法	1480 (L)×950 (W)×1140 (H)mm
質 量	95kg
シャワー流量	14L／min

※HK-3800-Sには、搬送車 (RA-8100) とボティースープが含まれます。

6年間保証

〈付帯機能〉	
自動洗身機能	入浴時間表示／報知機能
自動機器殺菌機能	ハンドシャワー1基
シャワーのみ吐出機能	報知音
ハンドシャワーのみ吐出機能	

別売品



01



02



03



04



05



06



07



08

	品 名	品番	数量	価 格
01	浴槽洗浄剤	SA-1	4本セット	¥ 12,000 (税別)
02	ボトル	HK3100-011	1個	¥ 9,000 (税別)
03	シャワーヘッド	HK255-012	1基	¥ 7,200 (税別)
04	ネックカーテン	HK3800-001	1枚	¥ 23,000 (税別)
05	キャップ	HK3800-002	1個	¥ 2,800 (税別)
06	浴槽カバー	HK3800-004	1個	¥ 98,000 (税別)
07	吸盤式シャワーフック	HK3800-005	1個	¥ 3,500 (税別)
08	OG Wellness Body Soap	BS-4L-OG	1個	¥ 7,500 (税別)

仕 様

搬送車

RA-8100 ¥2,100,000 (税別)

外 形 寸 法	1220 (L)×740 (W)×1280 (H)mm (搬送姿勢) 760 (L)×740 (W)×1280 (H)mm (移乗姿勢) 1380 (L)×740 (W)×1130 (H)mm (入浴姿勢)
質 量	47kg
背 部 角 度	60° (入浴時) / 81° (搬送時)
キャスター	前輪Φ100mm (ブレーキ付き)、後輪Φ125mm (ブレーキ付き)
安全機能	安全ベルト (腰部、胸部)
対 象 身 長	140～180cm
対 象 体 重	100kg以下

〈付帯機能〉	
バランスチルト	抗菌パッド
抗菌マット	抗菌ヘッドレスト
スライド式ヘッドレスト	開閉式サイドフェンス
ワンタッチ収納式レッグレスト	

〈標準付属品〉		
スポンジマット	RA8100-003	1枚
スポンジマット (踵部)	RA8250-005	1枚
安全ベルト (腰部)	RA825-001	1本
安全ベルト (胸部)	RA825-009	1本
パッド	RA355-015	2枚
ヘッドレスト	RA355-014	1個
クリップボタン	RA355-009	19個
クリップ	RA825-008	19個
マット外し	RA735-001	1個

別売品



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10

※スポンジマット交換の際には、合わせて、クリップ、クリップボタンの交換もお勧めします。

	品 名	品番	数量	価 格
01	スポンジマット	RA8100-003	1枚	¥ 28,000 (税別)
02	スポンジマット (踵部)	RA8250-005	1枚	¥ 7,000 (税別)
03	安全ベルト (腰部)	RA825-001	1本	¥ 7,500 (税別)
04	安全ベルト (胸部)	RA825-009	1本	¥ 9,000 (税別)
05	パッド	RA355-015	1枚	¥ 5,700 (税別)
06	ヘッドレスト	RA355-014	1個	¥ 35,000 (税別)
07	クリップボタン	RA355-009	1個	¥ 350 (税別)
08	クリップ	RA825-008	1個	¥ 100 (税別)
09	マット外し	RA735-001	1個	¥ 1,500 (税別)
10	固定用バックル	IB50SA-BK	1個	¥ 700 (税別)


オプション

	品 名	品番	数量	価 格
01	安全ベルト (足部)	RA825-002	1組	¥ 7,000 (税別)


	SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。	使用抗菌剤の種類 …… 無機抗菌剤
		加工方法 …………… 練込
		加工部位 …………… マット
		登録番号 …………… JP0123356X0001C

省スペース設計で、3×3.5mの浴室に設置可能

幅950mm×奥行き1480mmのコンパクトボディ。
3×3.5mの浴槽にも設置ができるため、小規模施設にも適しています。

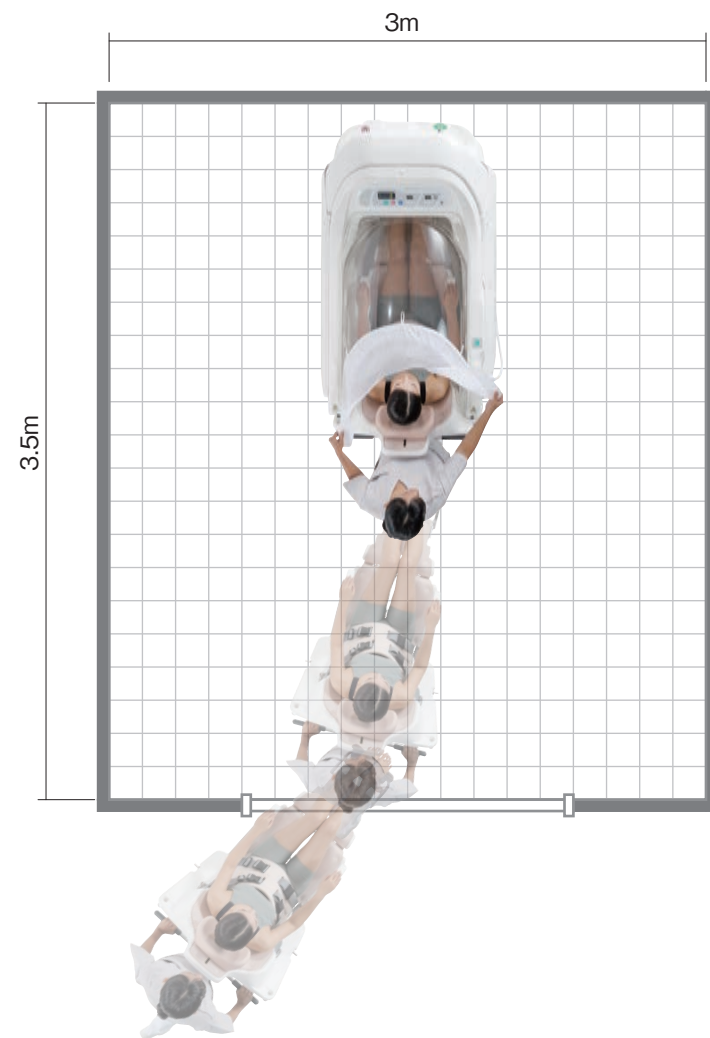


外構図

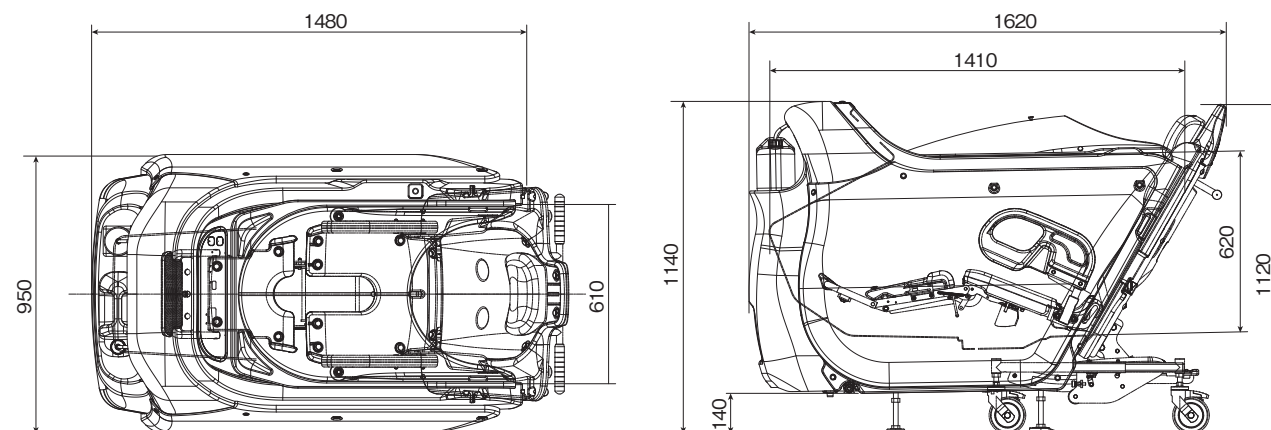


設置工事図

レイアウト例

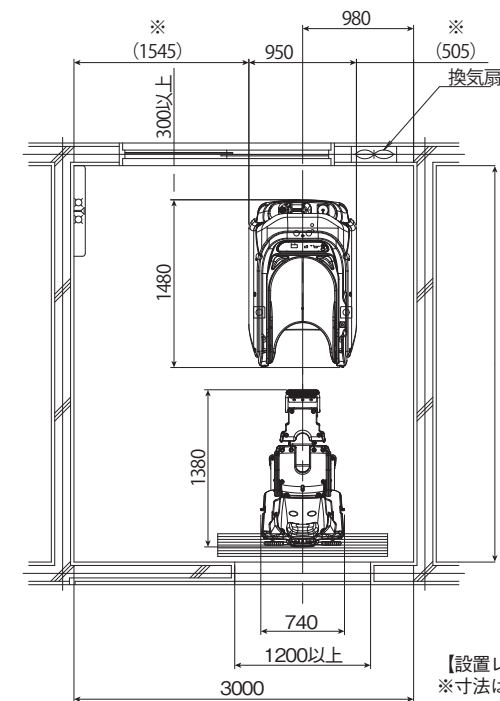

設置工事例

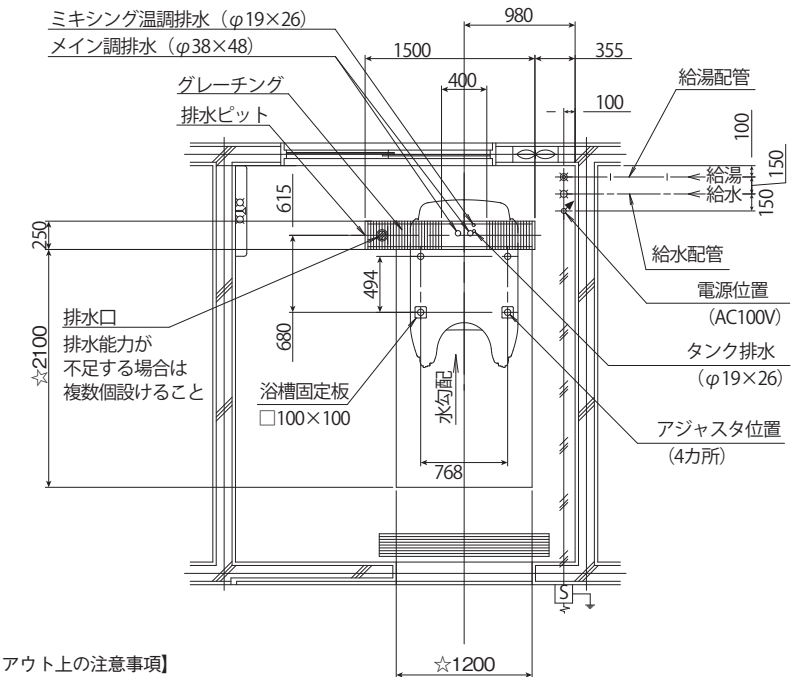

設備条件

設備工事	
給湯	20A、止水バルブ止め。床からの立ち上げ径…100mm
給湯・給水圧	150～300kPa
給湯・給水流量	各30L/min以上
給湯温度	60～70℃（末端温度）
電気工事	
電源	AC100V 50/60Hz、15A、配電盤には単独の漏電ブレーカーを設けること。（感度電流…30mA） アース線はD種規定に準ずること。
PF管	床面より3000mm立ち上げ通線し、電線は3芯で電線は管端より1000mm以上出す。 PF管の端末は防水処理を施すこと。電線は15A以上の電流が流れること。
建設設備工事	
床勾配	□で示した範囲は、床勾配1/100以下とし、同一勾配とする（☆部寸法）
排水能力	トラップ等の防臭対策を実施し、排水能力100L/min以上確保のこと。
排水	ビット排水（溝の深さは200mm以上）溝内に排水口を設けること。
ボイラー能力	90,000kcal/h以上のこと。 （電気給湯器使用時は入浴回数によって異なる為、別途問合せ必要）

